

## Agfa Dentus<sup>®</sup> Ortholux

Höchst möglicher Diagnoseerfolg durch gestochen scharfe Bilder

So einfach wechseln Sie auf den Agfa Dentus Ortholux.

### Ohne erneute Abnahmeprüfung.

#### 1. Schritt:


Führen Sie Ihre wöchentliche Konstanzprüfung wie gewohnt durch. Fertigen Sie zusätzlich eine Prüfkörperaufnahme mit dem Agfa Dentus Ortholux an (gleiche Belichtungswerte).

#### 2. Schritt:

Vergleichen Sie die mittlere Stufe im Agfa Dentus Ortholux und bei Ihrem Bezugsfilm (bei der Abnahmeprüfung angefertigter Film). Als Ergebnis erhalten Sie:

#### a) Entweder ...


weniger als eine Stufe Unterschied<sup>1</sup>.

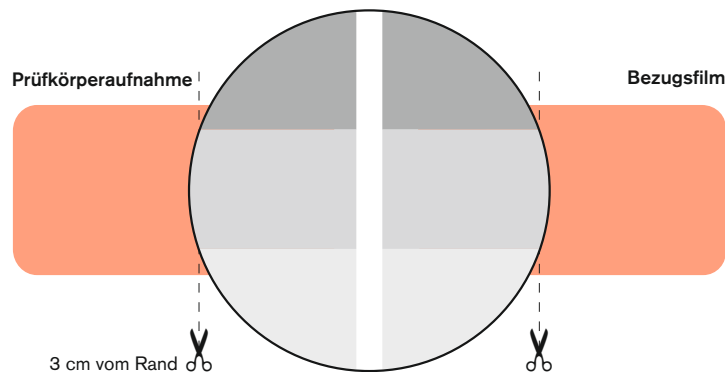

Tragen Sie die verwendeten Belichtungswerte und das Datum auf der Rückseite ein. Mit diesem neuen Formblatt ist der Filmwechsel dokumentiert. Die Prüfkörperaufnahme ist jetzt Ihre neue Bezugsaufnahme.

#### b) ... oder

die mittlere Stufe des Agfa Dentus Ortholux ist mehr als eine Stufe dunkler<sup>1</sup>.

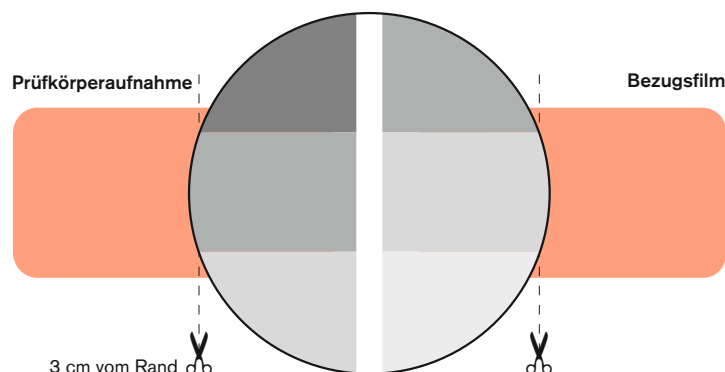

**Damit hat der Agfa Dentus Ortholux einen geringeren Dosisbedarf als Ihr bisheriger Film.** Reduzieren Sie die Belichtungswerte um eine Stufe (kV bzw. Zeiteinstellung am Röntgengerät) und fertigen Sie erneut eine Prüfkörperaufnahme an – bis **a)** zutrifft.

<sup>1)</sup> in beiden Fällen ist laut Richtlinie Sachverständigenprüfung nach Röntgenverordnung ab 1994 keine Teilabnahmeprüfung bei Filmwechsel notwendig, da der Wechsel keine Erhöhung der Bildempfängerdosis nach sich zieht.

